




CAVALÉ

Manual de Uso

Varita Facial Multifunción

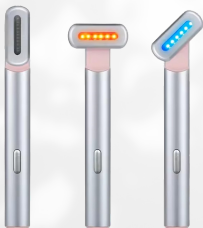

Antes de comenzar a usar este producto por favor lee cuidadosamente este manual. Para mayor información visita www.mycavale.com

Descripción del Producto

Varita facial multifunción que puede ayudar a absorber tus productos de cuidado facial de mejor forma, tonificar la piel, reducir la apariencia las ojeras, flacidez, acné, cicatrices y arrugas, retrasar la apariencia de más arrugas, y así, brindarte rejuvenecimiento facial.

Tecnologías del Producto

1. Fotorejuvenecimiento LED
2. Vibración de alta frecuencia (1200/minuto)
3. Compresa caliente (38-42 grados C)
4. Micro corriente de estimulación muscular eléctrica

Características del Producto

Cargador
Tipo C



Botón para
Encender



Cabeza Giratoria
330 grados



Lo que Incluye el Producto

1. Varita facial multifunción
2. Cable de carga USB tipo C
3. Manual de Uso

Modo de Uso del Producto

1. Lava tu rostro y aplica serum o crema facial o gel conductor sobre tu piel para mantenerla húmeda.
2. Enciende tu varita y aplícala sobre tu piel, cubriendo una zona de tu cara a la vez. Utilízala durante 2 minutos por cada zona, pasando la varita delicadamente sobre la piel sin hacer mucha presión, en constante movimiento, evitando usarla por más de 10 segundos sobre cada área dentro de la zona que estás trabajando.
3. Rota la cabeza de la varita facial acorde a la zona que estés trabajando, dependiendo de la posición de la misma que mejor se acomode al movimiento que requieres.
4. Al terminar su uso, apaga la varita facial y límpiala utilizando un algodón o toalla con agua o alcohol.
5. Consulta la cláusula de "Precauciones, Contraindicaciones & Advertencias" a continuación
6. Limitaciones de Responsabilidad: El uso indebido de este producto, o no seguir las instrucciones proporcionadas, es responsabilidad del usuario.

Parámetros del Producto

- Nombre del producto: varita facial multifunción
- Capacidad de la batería: 350mAh
- Dimensiones: 15.24cm x 1.6cm x 1.09cm
- Colores de luz: azul y roja
- Carga: 5V/1A, tiempo de carga: 2 horas
- Peso: 35g - Potencia: 1.5W
- Materiales principales: Metal + plástico PC
- Cantidad luz LED: 12 (6* luz azul & 6* luz roja)
- Longitud de onda: 456: 630 = 1 : 1
- Dimensiones de la caja: 17.45cm x 8.26cm x 2.8cm

Partes del Producto



Preguntas Frecuentes

¿Por qué no siento la microcorriente cuando la varita está en contacto con mi piel?

Puede que tu piel esté demasiado seca. Recuerda que debes humedecerla utilizando tu serum o crema facial, o un gel conductor para poder utilizar tu varita de la mejor manera.

¿Por qué no logro encender mi varita?

Quizás no tiene suficiente carga. Asegúrate de cargar bien tu varita antes de utilizarla.

¿Que tan a menudo puedo utilizar mi varita?

Se recomienda usarla durante 5-10 minutos, de 3 a 5 veces por semana. Lo mejor es utilizarla poco al inicio e incrementar su uso gradualmente.

¿Por qué no puedo utilizar la varita mientras se está cargando?

Por motivos de seguridad, no se debe usar la varita mientras se está cargando. Es por eso que la función se deshabilita durante su carga.

¿La varita es a prueba de agua?

No es a prueba de agua. No puedes o debes sumergir la varita entera en el agua. Puedes limpiar su cabezal masajeador utilizando una toalla o algodón con agua o alcohol.

¿El resultado es permanente?

Los efectos no son permanentes, por eso se recomienda su uso frecuente y constante. Puedes utilizar la varita antes de un gran evento (o, inclusive, la mañana después de uno) ya que los resultados suelen darse muy rápido en la mayoría de los casos.

¿En cuánto tiempo puedes ver resultados?

Si usas la varita de una forma constante, vas a poder ver resultados después de unas semanas.

¿Puedes usar la varita si te aplicaste bótox?

Se recomienda esperar por lo menos 1 mes desde la aplicación del bótox para utilizar la varita sobre esa zona.

Ingresa a www.mycavale.com para más Preguntas Frecuentes

Sobre la Carga

1. Inserta la terminal USB a un enchufe 5V USB y el conecta otro extremo (la terminal tipo C) al puerto de carga tipo C ubicado en la parte de abajo de la varita.
2. Cuando la luz comience a aparecer y desaparecer de forma intermitente, significa que la varita ya se está cargando. Se tarda 2 horas en cargar.
3. Cuando la luz se mantenga encendida significa que la varita ya está cargada al 100%. Desconecta el cargador tanto de la pared como también de la varita.
4. Si es que la luz se apaga y se enciende de forma intermitente, significa que la batería está por apagarse.
5. Es importante cargar la batería por lo menos 1 vez cada 2 meses para evitar que se sobre seque y se dañe.
6. Carga la batería completamente antes de usarla por 1ra vez.

Precauciones, Contraindicaciones & Advertencias

- Es crucial consultar a tu médico antes de usar la varita, sobre todo si tienes piel sensible, alguna condición en la piel, alergia en la piel, si estás haciéndote otro tratamiento facial (ejemplo: bótox) o si estás tomando medicamentos.
- La varita no es resistente al agua.
- No debes usar la varita si tienes menos de 18 años, si estás embarazada, si está dando de lactar, si tienes implantes médicos en el cuello o en la cara, si tienes alguna condición o enfermedad médica.
- No uses la varita si estás haciéndote algún tratamiento en la piel o si estás tomando medicina que implica una sensibilidad de la piel a la luz. Dejar de usar en caso de irritación
- No apliques la varita encendida sobre tu pecho, labios, boca, ojos, orejas, área de la tiroides, piel irritada o infectada, heridas abiertas o quemaduras.
- La varita es solamente de uso externo.
- No utilices la varita durante más de 10 segundos en el mismo sitio ya que puede irritarte la piel. Si eso sucede, deja de usarla unos días y consulta con tu médico antes de retomar su uso. Recuerda aplicarla sobre piel húmeda solamente.
- Es importante mantener el cabezal de la varita limpio y desinfectado en todo momento.
- Mantener fuera del alcance de los niños.